



DENTALAIR.PROFESSIONAL CARE

Maximale ergonomie: de nieuwe Anatom Mondial behandelstoel



De Anatom Mondial 3002 behandelstoel: de meest betrouwbare investering voor de toekomst!



*Optimale in- en uitstap van de patiënt
door de unieke vóór-instap.*

Geïntroduceerd in 1966 door de Zweedse praktiserende tandarts dr. Sven Lundin, staat Anatom na al die jaren nog steeds eenzaam aan de top op het gebied van ergonomie, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid voor (tand)arts en assistente en comfort voor patiënt. Door de uitzonderlijke constructie en kwaliteit is de stoel nagenoeg onverslijtbaar en bewijst dat in de praktijk door tientallen jaren trouwe dienst. De Anatom behandelstoel staat borg voor de beste anatomische werkhouding (de juiste focusafstand) van arts en assistente in alle (hoofd)professies. Deze kwaliteiten maken de Anatom stoel tot dé Zweedse patiënt/behandelstoel voor alle specialismen van het hoofd.


De stoel wordt in de tandheelkunde, implantologie alsmede in het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen op de poliklinieken van kaakchirurgie, oogheelkunde, k.n.o. en s.e.h. gebruikt. Het feit, dat de stoel zowel op zit- als op sta-hoogte in volledige vlakstelling kan, maakt hem uitstekend geschikt als operatietafel.

De Anatom stoel wordt gebruikt in de:


- implantologie
- kaakchirurgie
- k.n.o.-heelkunde
- mondhygiëne
- oogheelkunde
- orthodontie
- s.e.h.-afdelingen
- tandheelkunde

De Anatom behandelstoel: ergonomie voor (tand)arts, assistente en patiënt


De Anatom stoel is uniek onder de huidige behandelstoelen omdat ergonomie het uitgangspunt is. Dat resulteert in: goed zitten, goed zien en goed werken met een relaxte patiënt. De extreem dunne, vlakke en stabiele rugleuning zorgt voor de juiste werkhouding en goed zicht in de mond door arts en assistente bij zittende, halfzittende en liggende patiënten (ook bij kinderen).

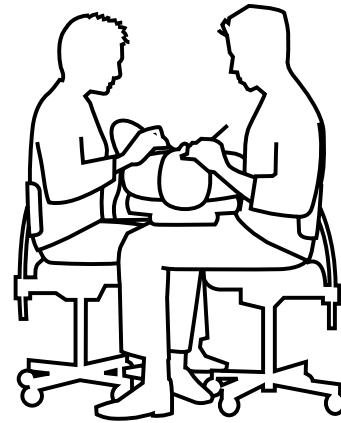

Door unieke dunne rugleuning altijd de ideale zitpositie voor arts en assistente.

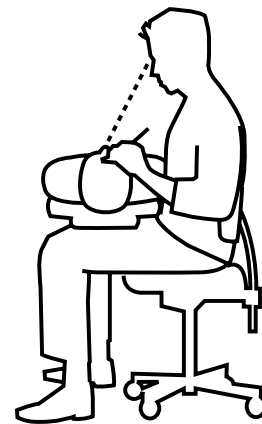

Gewenste behandelpositie met ideale focusafstand van 30-35 cm. door de dunne en vlakke rugleuning.

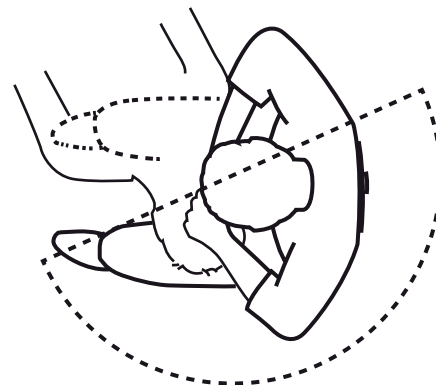

Volkomen vrije werkpositie van 9-3 uur rond het hoofd van de patiënt.

Anatom: altijd de optimale positie

Ideale focusafstand

Dankzij de uiterst dunne en vlakke rugleuning en hoofdsteun tot aan het zitgedeelte kunnen de behandelaar en assistente met beide knieën parallel onder de rugleuning optimaal zitten, zien en werken met de ideale focusafstand van 30-35 cm. en kan eenvoudig rondom het hoofd bewogen worden. Het hoofd van de patiënt ligt als het ware op de schoot van behandelaar en assistente.

Vóór-geprogrammeerde stoelposities

De 8 verschillende programma-standen voor werkposities en uitstapstanden zijn eenvoudig te programmeren. Aan de Anatom behandelstoel kan zowel zittend als staand worden gewerkt. Met de stoel en patiënt in zitpositie kan de patiënt in het front behandeld worden.

Hygiënische bediening

Door de combi-voetpedalen is de bediening hygiënisch, daar de handen niet gebruikt hoeven te worden. De stoel beweegt identiek aan de bewegingen van het voetpedaal. De knie-hoekverstelling tot de operatietafel stand bevindt zich aan de zijkant van de stoel.



De enige stoel met de echte vóór-instap door de patiënt

De vóór-instap heeft grote voordelen voor de patiënt (die minder mobiel is) omdat deze, net als thuis, gemakkelijk in de stoel kan gaan zitten.

De patiënt heeft een eigen looproute naar de stoel, waardoor die van de (tand)arts en de assistente niet wordt gekruisd.



Bekleding en lakwerk

De bekleding is leverbaar in 8 fraaie kleuren uit de Ambla/Bowland skai-collectie. Het lakwerk is standaard in de kleur RAL 9002 (wit/lichtgrijs) of RAL 9010 (wit), zodat de stoel aangepast kan worden aan de stijl van de praktijk.



De Anatom Mor tot in elk de

Hoofdsteun horizontaal en verticaal
(dubbel articulerend) verstelbaar,
geschikt voor volwassenen en kinderen.

Anatomisch comfort voor patiënt.
(bloedstuwung naar het hoofd
wordt tot een minimum beperkt).

Opklapbare armleuningen.


Door de uiterst dunne en vlakke
rugleuning een ergonomisch
juiste zit- en werkpositie
(optimale focusafstand)
voor arts en assistente.

Noodstop.

Trendelburg-positie.

Stoelpositie eenvoudig
programmeerbaar, dus altijd
de ideale werkpositie.

Hygiënische bediening
van de combi-voetpedalen
aan 2 zijden van de basis.

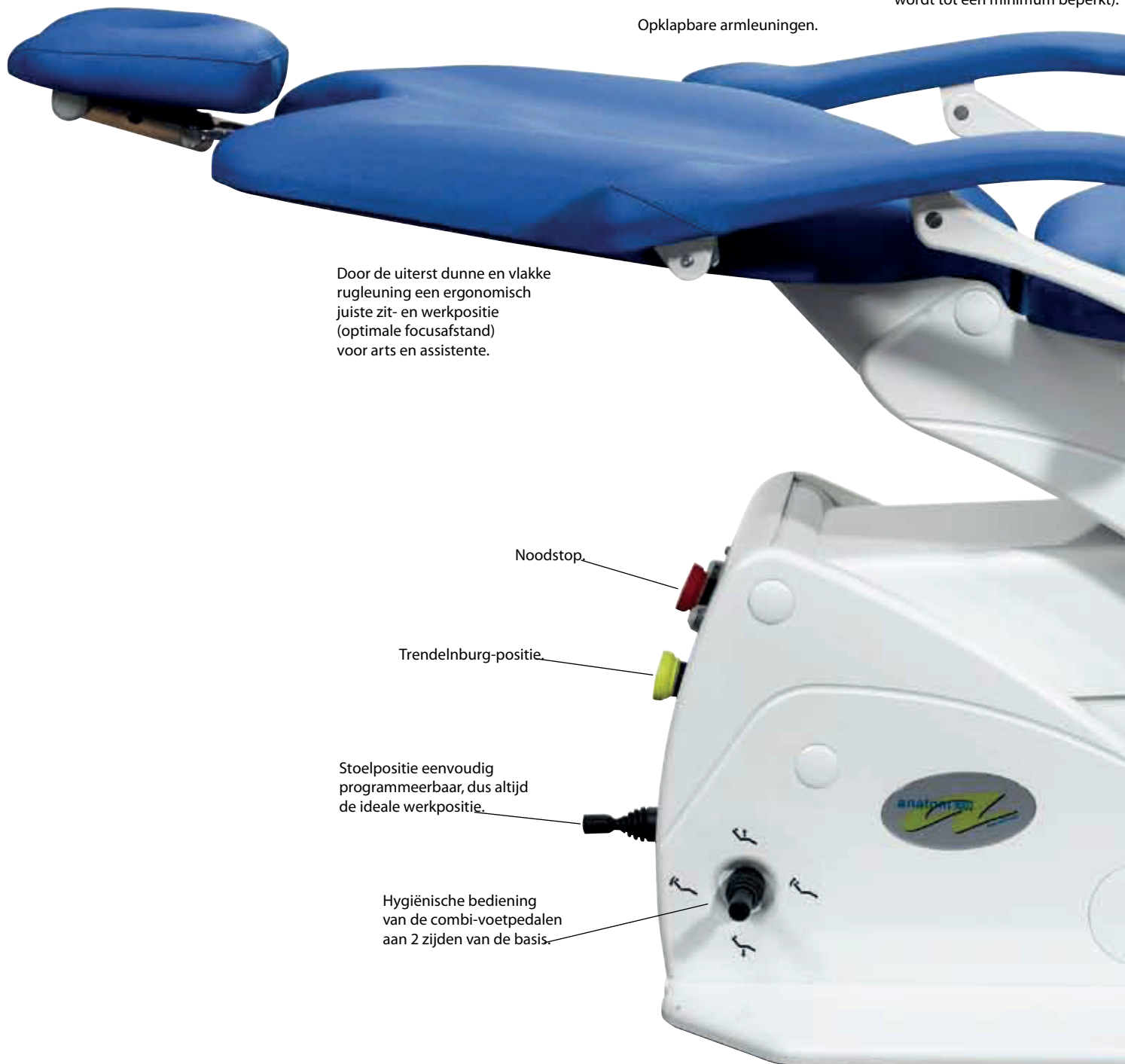

ndial behandelstoel: tail doordacht!

Rug- en beengedeelte
bewegen synchroon.

Met de stoel en patiënt in
zitpositie kan de patiënt in
het front behandeld worden.



De knie-hoekverstelling tot
de operatietafel-stand.

Aan de Anatom stoel kan
zowel zittend als staand
worden gewerkt.



Zo veelzijdig is de Anatom Mondial behandelstoel



Trendelenburg-positie.

De patiënt voelt zich relaxed in de Anatom Mondial 3002 behandelstoel door de ergonomische vormgeving. De synchrone beweging van rug- en beengedeelte voorkomt schrik bij het achterovergaan. Als de rugleuning horizontaal is, kan het beengedeelte geknikt of plat zijn. De Mondial 3002 stoel is ook uitstekend geschikt als operatietafel voor zowel staand als zittend werken en heeft zich al meer dan 40 jaar bewezen bij tientallen ziekenhuis-poliklinieken in Nederland. Tevens is de uiterst dunne rugleuning erg ideaal voor de zittende behandelaar. De behandelaar kan namelijk met beide knieën parallel onder de rugleuning zitten.

De Anatom Mondial 3002 heeft als karakteristieken:

- unieke vóór-instap patiënt
- voor staand en zittend werken
- uiterst dunne rugleuning
- volledig verstelbare hoofdsteun (optie)
- knie-hoek-verstelling (operatietafel)
- trendelenburg instelling (aut. elektrisch)
- hoogteverstelling tot 94 cm
- ingebouwde verrijdbaarheid (optie)
- 2 te programmeren eindstanden
- 6 te programmeren werkstanden
- bekleding in 8 verschillende kleuren
- lakwerk in 2 kleuren



Vóór-instap.



Anatomisch juist gevormde behandelstoel.



Hoofdsteun dubbel articulerend.


De nieuwe Anatom Hospital 3010 behandelstoel

Speciaal ontwikkeld uit de Mondial 3002 stoel, geschikt voor staande/zittende behandelingen in de kaakchirurgie, k.n.o.-, oogheelkunde en s.e.h.



De Anatom Hospital 3010 heeft als karakteristieken:


- unieke vóór-instap patiënt
- voor staand en zittend werken
- uiterst dunne rugleuning
- volledig verstelbare hoofdsteun
- knie-hoek-verstelling (operatietafel)
- trendelburg instelling (aut. elektrisch).
- hoogteverstelling tot 104 cm
- ingebouwde verrijdbaarheid
- 2 te programmeren eindstanden
- 6 te programmeren werkstanden
- bekleding in 8 verschillende kleuren
- lakwerk in 2 kleuren

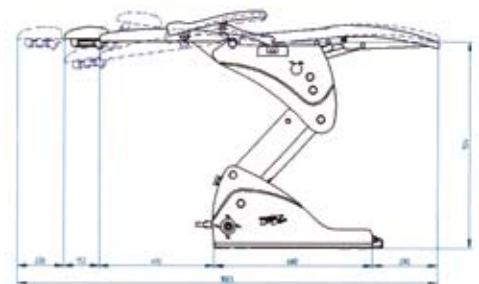

Hoogteverstelling tot 104 cm.



Dubbel-axiaal te verstellen hoofdsteun.

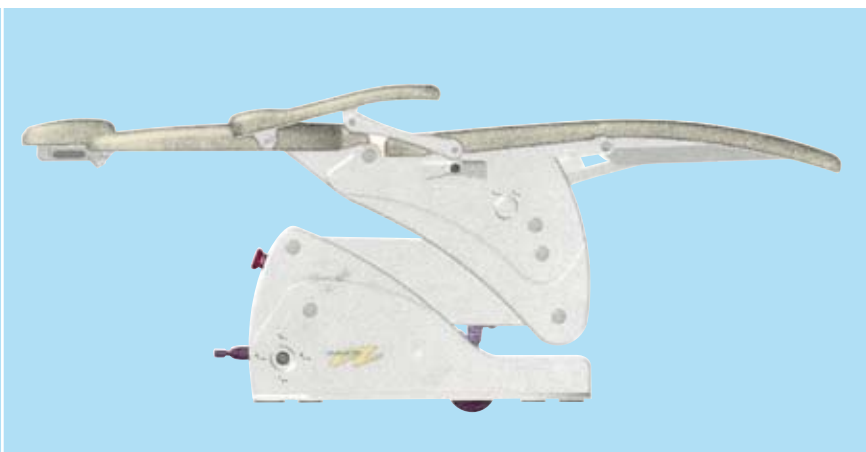

De 3010 stoel met een ingebouwde verrijdbaarheid (elektrisch in te stellen).

De nieuwe Anatom Hospital 3020 operatietafel



Speciaal ontwikkeld voor alle operaties in de kaakchirurgie, k.n.o.-, oogheelkunde en op de s.e.h.-afdeling.

Deze operatietafel is d.m.v. de voetpedalen (elektrisch) in alle werkposities te brengen.



Zittend werken.



Staannd werken.

De Anatom Hospital 3020 operatietafel heeft als karakteristieken:

- unieke vóór-instap patiënt
- voor staand en zittend werken
- uiterst dunne rugleuning
- volledig verstelbare hoofdsteun
- knie-hoek-verstelling
- trendelburg instelling (aut. elektrisch)
- hoogteverstelling tot 104 cm.
- ingebouwde verrijdbaarheid
- 2 te programmeren eindstanden
- 6 te programmeren werkstanden
- rails aan beide zijanten voor montage van diverse attributen
- bekleding zwart antistatisch
- lakwerk in RAL 9002



Unieke vóór-instap.



Anatomisch juist gevormde behandelstoel/tafel.



Hoofdsteun dubbel articulerend.



Dentalair Products Nederland b.v.

Postbus 273 - 3300 AG Dordrecht | Wieldrechtseweg 26 - 3316 BG Dordrecht
T 078 654 37 37 | F 078 654 37 30 | E info@dentalair.nl | www.dentalair.nl

